


# Coag&Cut M120

**Bistouri électrique 120W  
Monopolaire et Bipolaire**



# Coupe, coagulation et micro-coagulation

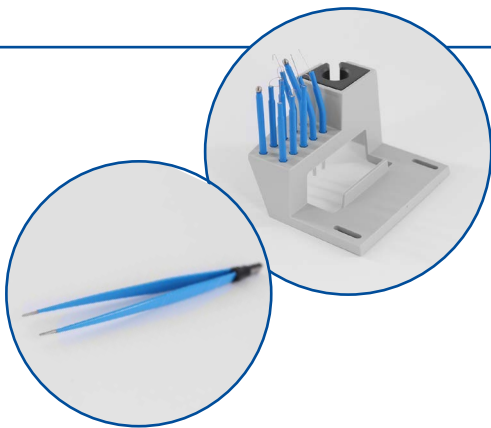

## Conçu pour toutes vos interventions de petite et moyenne chirurgie

Très performant, le bistouri **Coag&Cut M120** dispose de nombreux modes opératoires :

En coupe :

- ▶ CUT = Coupe pure
- ▶ BLEND = Coupe coagulée

En coagulation :

- ▶ FORCED = Coagulation standard rapide et efficace
- ▶ SOFT = Coagulation avec effet en profondeur, sans carbonisation
- ▶ BIPOLEAR = Coagulation bipolaire standard

## Fiabilité

La lecture numérique de la puissance délivrée et le suivi de fonction opérationnelle par microcontrôleur garantit une fiabilité absolue des conditions de travail.



## Sécurité

La connexion avec la plaque neutre est suivie en continu.

La pièce à main monopolaire, utilisée sans pédale permet de choisir et d'activer soit le mode coupe (bouton jaune), soit le mode coagulation (bouton bleu). Couplée à la pédale, elle permet de choisir la fonction qui ne s'active alors que par la pédale.

Les interventions chirurgicales peuvent être ainsi effectuées en toute sécurité.




## Efficacité

Puissance maximale :

- ▶ Coupe CUT : 120W-250Ω
- ▶ Coupe/coagulation BLEND : 90W-200Ω
- ▶ Coagulation FORCED : 80W-150Ω
- ▶ Coagulation SOFT : 60W-100Ω
- ▶ Coagulation BIPOLEAR : 40W-100Ω

Fréquence de travail : 600 kHz  
Fréquence : 50-60 Hz  
Puissance max. absorbée : 300 VA  
Dimensions & poids : 25x10x29 cm - 5 kg

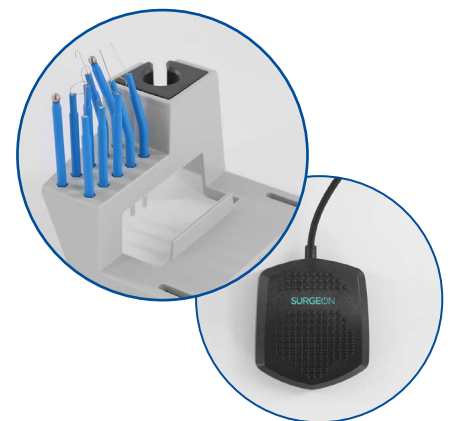

## Le bistouri Coag&Cut M120 inclut :

- ▶ Une pièce à main monopolaire porte électrode
- ▶ Un set de 10 électrodes + support
- ▶ Une plaque neutre
- ▶ Une pince bipolaire droite
- ▶ Une pédale

 **Mano Médical**

Medical equipment for veterinarians

22, rue Charles de Gaulle  
22100 Lanvallay - France  
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

[contact@manomedical.com](mailto:contact@manomedical.com)

[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)