

# Réchauffeur de perfusion Vet Temp 3



PRÉVENEZ  
L'HYPOTHERMIE  
TOUT  
SIMPLEMENT !

**Vet Temp 3 réchauffe le liquide à perfuser et l'amène à une température proche de l'animal.**

- Réchauffe tout type de liquide à perfuser y compris le sang
- Léger, seulement 200 gr !
- Portable et compact
- Simple et rapide à utiliser
- Facile à nettoyer
- Compatible avec la plupart des sets de perfusion standard pour petits animaux
- Livré avec une sangle d'attache et un support pour pied à perfusion

 **Mano  
Médical**  
Medical equipment for veterinarians

# Réchauffeur de perfusion Vet Temp 3

Vet Temp 3 est conçu pour résister aux projections d'eau.

L'appareil articulé sur deux charnières est verrouillé par système magnétique.

Vet Temp 3 est doté d'un système d'alarmes visuelles et sonores, avec protection contre la surchauffe.



## Pourquoi est-il important de réchauffer tout liquide à perfuser ?

Le maintien de la température corporelle du patient lors d'une anesthésie ou durant la phase de réanimation est indispensable pour éviter des risques tels que :

- Choc
- Problèmes cardiaques ou insuffisance rénale, ceci à court et moyen terme...
- Hypothermie


L'usage d'outils pratiques permettant au patient d'économiser l'énergie qu'il consacre au maintien de sa température est indispensable.

Vet Temp 3 permet d'apporter à l'animal un liquide à température proche de sa température corporelle. L'animal nécessitera beaucoup moins d'énergie pour maintenir sa propre température corporelle. Le risque d'une hypothermie intra ou postopératoire sera considérablement diminué. Tout comme les matelas chauffants Carbon Tech, Vet Temp 3 prévient du refroidissement trop important du patient.


Avantages du Vet Temp 3 :

- ▶ Permet l'injection d'un liquide à température constante en toute sécurité
- ▶ Adéquat pour les perfusions avec une pompe à perfusion ou pour toute perfusion par gravité
- ▶ Simple et rapide d'emploi
- ▶ Investissement pour un usage utile et à long terme
- ▶ Pas de consommables nécessaires donc pas de coûts additionnels


3 longueurs de circuit pour ajuster au mieux les températures de liquide parvenant à l'animal :

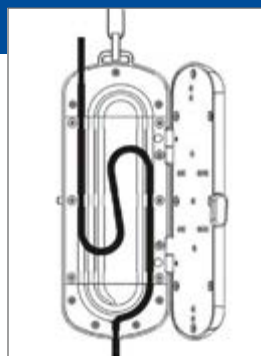

Circuit de 25 cm

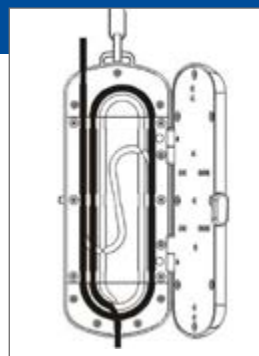

Circuit de 31 cm

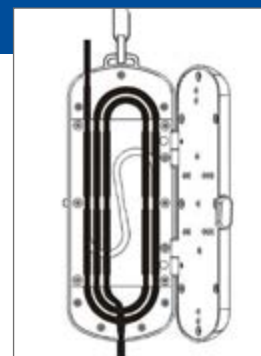

Circuit de 52 cm

Spécifications techniques :

▶ Longueurs de circuit	25, 31 et 52 cm
▶ Compatibilité perfuseur	Sets de perfusion standards de 20 et 60 gouttes / ml
▶ Diamètre perfuseur	Entre 3,4 et 4,5 mm
▶ Température	Entre 35°C et 42°C
▶ Temps de chauffe	≤ 2 min.
▶ Alarmes	Surchauffe, température basse, erreur système, boîtier ouvert, rappel température
▶ Alimentation	100-240 V / 50-60 Hz
▶ Dimensions et poids	18x7x3,5 cm - 200 gr



**Mano Médical**

Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle  
22100 Lanvallay - France  
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

[contact@manomedical.com](mailto:contact@manomedical.com)

[www.manomedical.com](http://www.manomedical.com)