

Pousse-seringue ManoPump SP1

**SIMPLE
ET
PERFORMANT !**



Pousse-seringue ManoPump SP1

Pour une utilisation lors d'anesthésie, en analgésie, en oncologie...




SIMPLICITÉ :

- Détection automatique de la taille de la seringue (5, 10, 20, 30 et 50/60 ml)
- Grand écran tactile 4,3'' (10,75 cm) pour un affichage clair des paramètres

PERFORMANCE :

- 3 modes de fonctionnement : ml/h (temps, débit), masse corporelle, micro
- Débit de 0,1 à 1 500 ml/h
- Fonction garde-veine ouverte par micro-perfusion (KVO) réglable de 0,01 à 5 ml / h.
- Batterie performante (jusqu'à 12 heures d'autonomie)
- Grande capacité de stockage (jusqu'à 5 000 enregistrements)

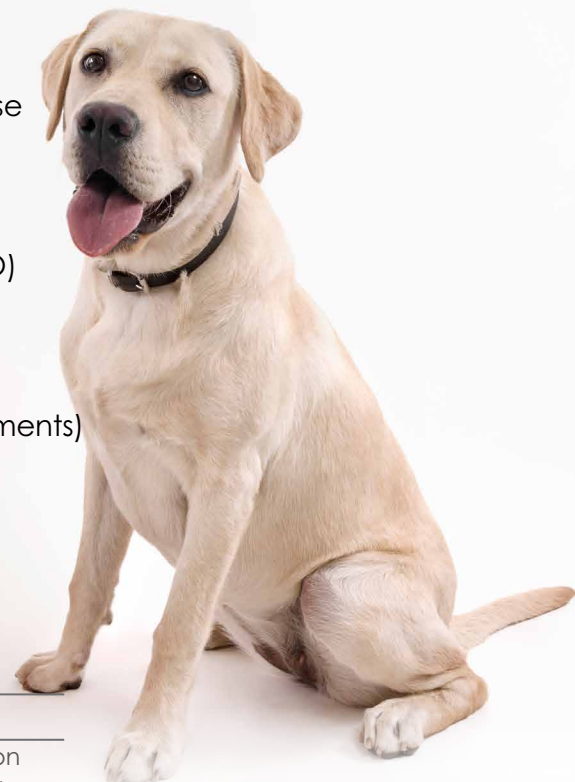

Caractéristiques techniques ManoPump SP1 :

▶ Volume à perfuser	De 0,1 à 9 999 ml
▶ Écran tactile	4,3 pouces (10,75 cm)
▶ Taille de seringue	5, 10, 20, 30, 50/60 ml avec détection automatique de la marque et de la taille après calibration
▶ Débit	De 0,1 à 1 500 ml/h
▶ Fonction garde-veine ouverte (KVO)	Réglable de 0,01 à 5 ml/h
▶ Fonction bolus	Réglable de 0,1 à 1 500 ml/h en manuel ou en automatique
▶ Occlusion	4 niveaux
▶ Modes	ml/h (temps et débit) • masse corporelle • micro
▶ Alarmes	Volume • seringue vide • pression élevée • batterie faible • perfusion bloquée • fonction garde-veine terminée • perfusion terminée • pousse-seringue débranché • erreur système
▶ Historique des traitements	5 000
▶ Étanche	Norme IP24
▶ Dimensions totales et poids	40x9x12 cm - 1,7 kg
▶ Autonomie sur batterie	12h à 5 ml/h
▶ Alimentation	100-240V, 50-60 Hz

**Mano Médical**
Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com
www.manomedical.com