



Coag&Cut M120

**Bistouri électrique 120W
Monopolaire et Bipolaire**

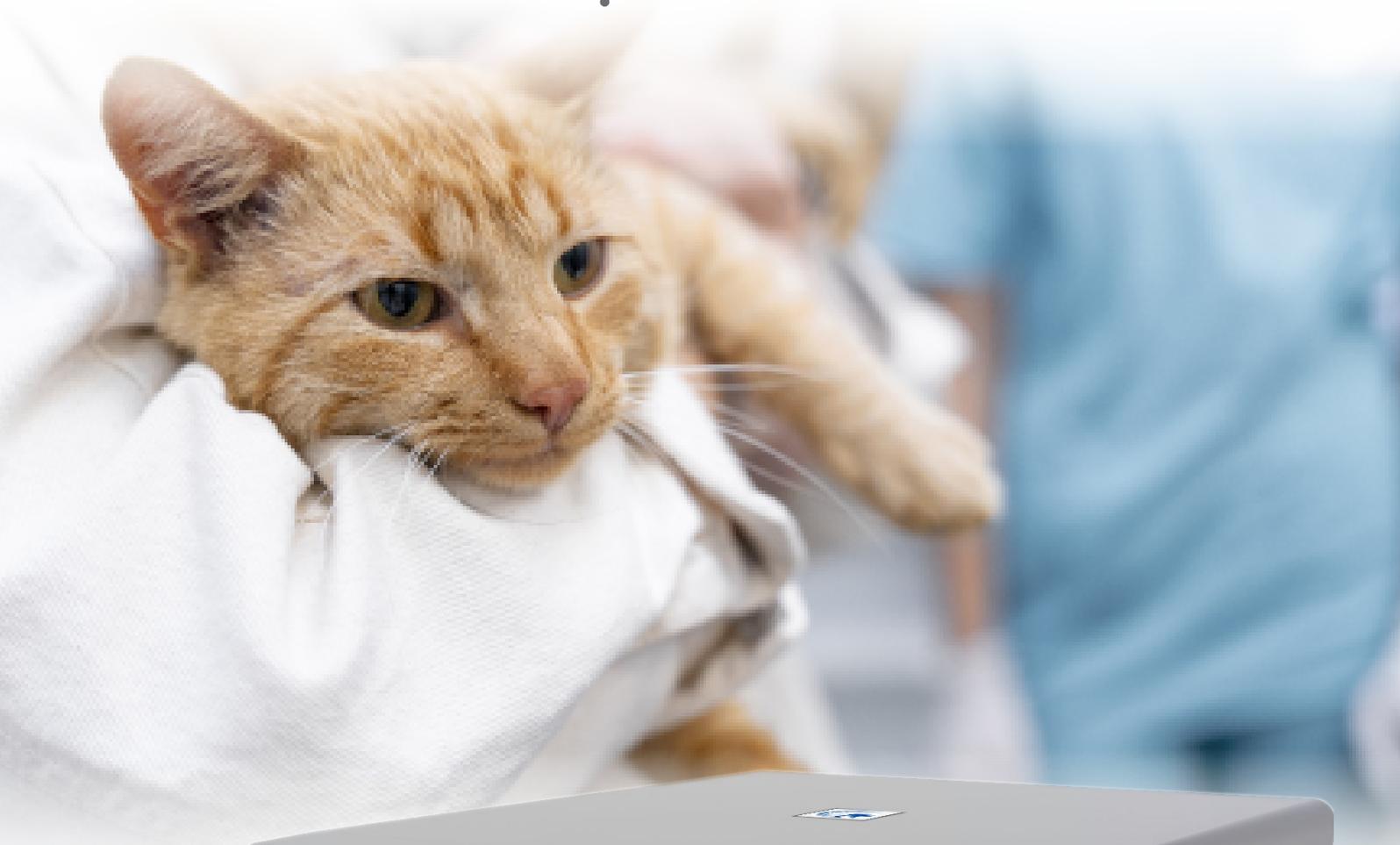

Coupe, coagulation et micro-coagulation

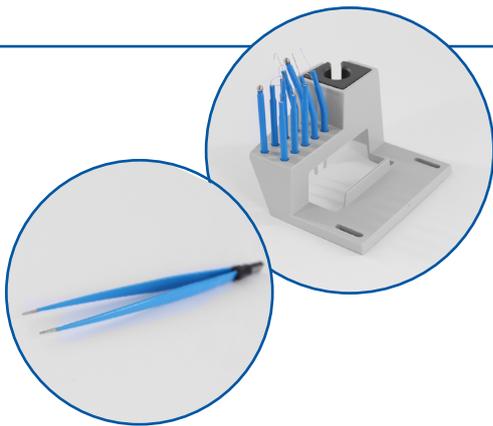

Conçu pour toutes vos interventions de petite et moyenne chirurgie

Très performant, le bistouri **Coag&Cut M120** dispose de nombreux modes opératoires :

En coupe :

- ▶ CUT = Coupe pure
- ▶ BLEND = Coupe coagulée

En coagulation :

- ▶ FORCED = Coagulation standard rapide et efficace
- ▶ SOFT = Coagulation avec effet en profondeur, sans carbonisation
- ▶ BIPOLEAR = Coagulation bipolaire standard

Fiabilité

La lecture numérique de la puissance délivrée et le suivi de fonction opérationnelle par microcontrôleur garantit une fiabilité absolue des conditions de travail.



Sécurité

La connexion avec la plaque neutre est suivie en continu.

La pièce à main monopolaire, utilisée sans pédale permet de choisir et d'activer soit le mode coupe (bouton jaune), soit le mode coagulation (bouton bleu). Couplée à la pédale, elle permet de choisir la fonction qui ne s'active alors que par la pédale.

Les interventions chirurgicales peuvent être ainsi effectuées en toute sécurité.




Efficacité

Puissance maximale :

- ▶ Coupe CUT : 120W-250Ω
- ▶ Coupe/coagulation BLEND : 90W-200Ω
- ▶ Coagulation FORCED : 80W-150Ω
- ▶ Coagulation SOFT : 60W-100Ω
- ▶ Coagulation BIPOLEAR : 40W-100Ω

Fréquence de travail : 600 kHz
Fréquence : 50-60 Hz
Puissance max. absorbée : 300 VA
Dimensions & poids : 25x10x29 cm - 5 kg

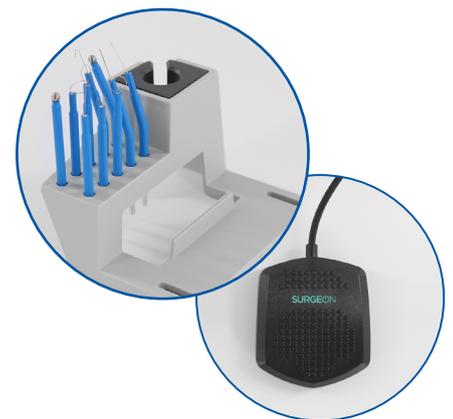

Le bistouri Coag&Cut M120 inclut :

- ▶ Une pièce à main monopolaire porte électrode
- ▶ Un set de 10 électrodes + support
- ▶ Une plaque neutre
- ▶ Une pince bipolaire droite
- ▶ Une pédale



22, rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com