


CarbonTech

Technologie Révolutionnaire
au Service du Bien-Être Animal



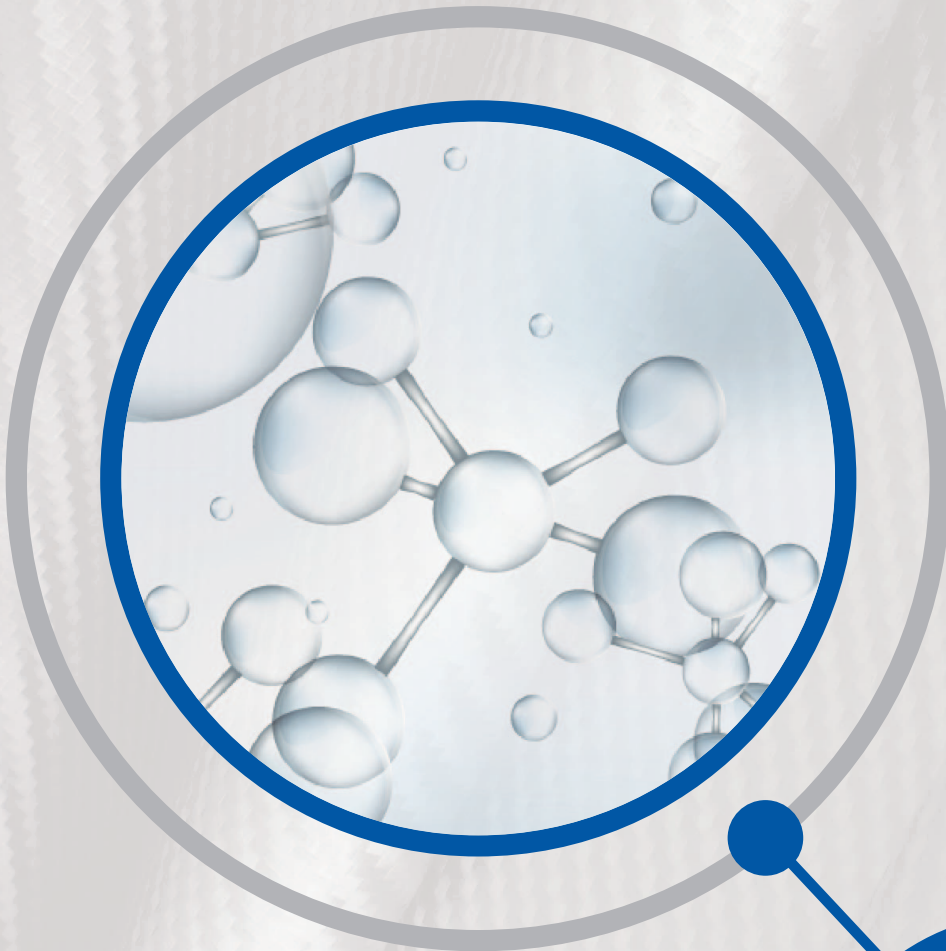

Pourquoi utiliser un matelas chauffant vétérinaire ?



Carbon Tech est un dispositif chauffant destiné à la prévention de l'hypothermie et développé spécialement pour être utilisé par les vétérinaires.*

En préventif

Le maintien de la température corporelle est essentiel, aussi bien lors d'une anesthésie qu'en réanimation. La température des patients baisse chez tous les patients sans exception lors d'une anesthésie.

Conséquences possibles d'un refroidissement :

- Réveil difficile
- Risque de choc
- Risque d'insuffisance rénale ou de problèmes cardiaques
- Dans certains cas, mort du patient

Ceci se vérifie lors de toutes les interventions, y compris les interventions dites bénignes telles qu'un détartrage.

Plus l'animal est petit, plus le risque d'hypothermie est élevé. Les NAC sont particulièrement concernés.

En curatif

L'hypothermie consécutive à un choc ou à une anesthésie est à traiter systématiquement. En phase de réanimation, il est important de maintenir la température corporelle aussi proche que possible des 38°C. Le matelas chauffant Carbon Tech réchauffe le patient en douceur, sans danger et sans risque de brûlure.

L'utilisation du matelas Carbon Tech et le contrôle régulier de la température du patient lors d'une anesthésie et durant la réanimation sont des gestes simples mais indispensables.

2 modèles au choix :

Modèle cage :

52 x 62 cm (+/- 1 cm)

Puissance : 25W

Modèle table :

52 x 112 cm (+/- 1 cm)

Puissance : 50W

Tension utile 24V continue avec alimentation électronique universelle de 100 à 240V



*Le matelas chauffant CarbonTech a été conçu et validé pour une utilisation sur le chien et le chat. Ce dispositif chauffant peut être utilisé pour d'autres espèces animales sous la seule responsabilité de l'utilisateur. Dans ce cas une vigilance accrue vis-à-vis du respect des précautions d'usage détaillées dans le manuel sera préconisée, tout particulièrement si le métabolisme ou la température corporelle de l'espèce en question diffèrent significativement de ceux du chien et du chat.

CarbonTech

100% Efficacité, 100% Sécurité !

Haute technologie pour une efficacité maximale

CarbonTech intègre un tissu carbone haute densité, spécialement conçu pour diffuser la chaleur de façon homogène.

Sa structure souple épouse parfaitement la forme de l'animal et lui apporte ainsi un maximum de confort.



Simple d'utilisation

Une fois branché, CarbonTech atteint sa température de régulation en moins de 5 minutes.

CarbonTech est conçu pour maintenir la température nécessaire au réchauffement de l'animal durant de longues périodes.

Chauffe en toute sécurité

D'une densité d'éléments chauffants six fois plus importante que les matelas classiques, CarbonTech délivre une température de contact basse tout en apportant à l'animal l'énergie nécessaire à son réchauffement.

Extra plat, le tissu carbone de CarbonTech ne stocke pas de chaleur, évitant ainsi tout risque de brûlure.



Robuste

Le revêtement de CarbonTech est conçu pour résister aux griffures et aux morsures et garantit une parfaite étanchéité.

Hygiénique

CarbonTech se nettoie simplement à l'eau et au savon. Après séchage, il se désinfecte facilement à l'alcool.



22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France

Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com

Carbon Tech



REVÊTEMENT
GARANTI
5 ANS
contre
les griffures
et les morsures

